

INSTRUCTIONS



LE SERVICE KIT CONTIENT

UN KIT DE PRELEVEMENT SALIVAIRE

UN SACHET AVEC ETIQUETTE D'IDENTIFICATION POUR L'ENVOI DE L'ECHANTILLON AU LABORATOIRE
LES INSTRUCTIONS

MARCHE A SUIVRE

1. COMPLETER LA DEMANDE D'ANALYSE PCR

Utiliser le formulaire online

<https://www.pcrtestswiss.ch/test-request-pmdl/>




2. PROCEDER AU PRELEVEMENT DE LA SALIVE

Suivre les instructions du guide vidéo

<https://youtu.be/TxewwJANrZM>



3. PLACER CHAQUE ECHATILLON DANS SA BOITE AVEC NUMERO D'IDENTIFICATION

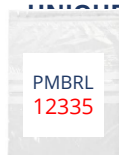

Numéro à 5 chiffres present sur la boîte d'envoi = numéro d'identification unique

(numéro introduit pour chaque voyageur dans le formulaire de demande)

4. METTRE LA BOÎTE DANS L'ENVELOPPE PREAFFRANCHEE ET LA DEPOSER A LA POSTE

Consulter le site internet www.delra.net/shop pour trouver réponse aux questions fréquentes.

INSTRUCTIONS



THE SERVICE KIT CONTAINS
SALIVA COLLECTION KIT
ID LABELED BAG
INSTRUCTIONS

FOLLOW THE STEPS

1. FILL IN ONLINE FORM

<https://www.pcrtestswiss.ch/test-request-pmdlr/>



2. COLLECT SALIVA

Follow the online video guide

<https://youtu.be/TxewwJANrZM>



3. PLACE EACH SAMPLE IN ITS ID BAG



5 DIGITS NUMBER ON THE BAG = 5 DIGITS NUMBER ON THE REQUEST
This is the test ID that you entered for each traveller in the online form.

4. HANDLE THE SAMPLE TO THE CONCIERGE

On www.delra.net/shop you will find more information about the kit and the testing process.

ANWEISUNGEN



DAS SERVICE-KIT ENTHÄLT

EIN SPEICHEL-PROBEN KIT

EIN BEUTEL MIT IDENTIFIKATIONSETIKETTEN FÜR DEN VERSAND DER PROBE AN DAS LABOR
DIE ANWEISUNGEN

WEG ZU FOLGEN

1. AUSFÜLLEN DER PCR-ANALYSE-ANTRAGSFORMULAR

Nutzen Sie das Online-Formular

<https://www.pcrtestswiss.ch/test-request-pmdl/>




2. SPEICHEL-SAMMLUNG

Folgen Sie den Anweisungen des Video-Tutorials

<https://youtu.be/TxewwJANrZM>



3. JEDE PROBE IN SEINEM BEUTEL MIT DER IDENTIFIKATIONSNUMMER SETZEN

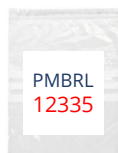

5-stellige Nummer auf dem Beutel = eindeutige Identifikationsnummer

(für jeden Reisenden im Antragsformular eingetragene Nummer)

4. SETZEN SIE DEM BEUTEL IN DEN VORFRANKIERTEN UMSCHLAG UND GEBEN SIE ES BEI DER POST AB

Besuchen Sie die Website www.delra.net/shop, um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden.